

# geemarc PhotoPHONE

## User guide

Amplified desk telephone  
with volume and tone control



## Notice d'utilisation

Téléphone multifonctions  
avec réglage du volume et de la tonalité

<b>Description</b>	<b>4</b>
<b>Setting up</b>	
- Connecting the telephone	6
- Ringer settings	6
- T/P switch	8
- Time break recall switch	8
- Wall mounting	8
- Desk support	10
<b>Volume and tone adjustment</b>	
- Receiving volume and tone	11
- Sending volume level adjustment	12
<b>Using the phone</b>	
- Answering incoming call	13
- Making a call	13
- Last number redial	13
- Recall, * & # buttons	14
- Mute button	14
- Storing telephone numbers	14
- Dialling stored number	16
<b>General information</b>	<b>17</b>

<b>Description</b>	<b>18</b>
<b>Installation</b>	
- Raccordements	20
- Réglage de la sonnerie	20
- Multifréquences ou décimale	22
- Interrupteur 300ms/100ms	22
- Montage mural	22
- Position bureau	<b>24</b>
<b>Réglage du volume et de la tonalité</b>	
- Volume et tonalité de réception	25
- Réglage du volume d'émission	26
<b>Utilisation</b>	
- Recevoir un appel	27
- Appeler	27
- Rappel du dernier numéro	27
- Touches R, * & #	28
- Fonction secret	28
- Mémoriser un numéro de téléphone	28
- Appel d'un numéro en mémoire	30
<b>Informations générales</b>	<b>31</b>

# Description

Direct memory buttons

Flashing incoming ring indicator



Tone reception adjustment

Volume reception adjustment


Extra volume and tone activation

Memory storing key


Time break recall button

Mute button

Last number redial

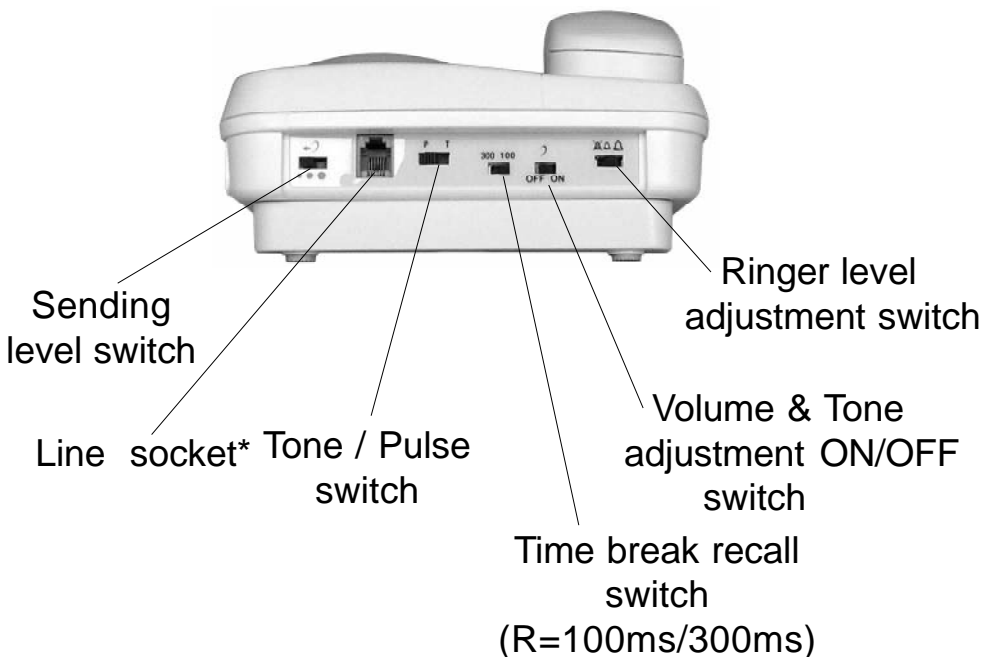

(\*) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.

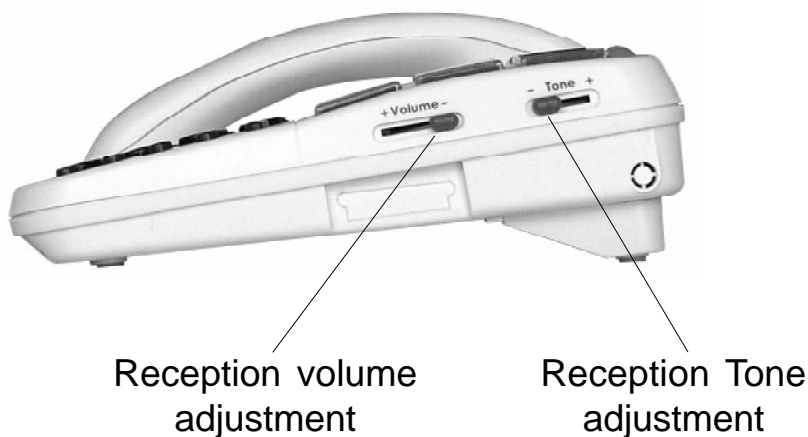

# Setting up

## 1 - CONNECTING THE TELEPHONE

- Connect the handset cord.
- Open the battery compartment.

Insert 4 alkaline batteries without mercury (Type AAA 1.5V, not supplied) in the compartment (\*). Batteries are required if you wish to increase the ringer level up to 10 dB.


Snap the battery door back in place.

- Connect the line cord plug to the line socket on the base (\*).

Connect the other end of the line cord to the PTT socket. (\*)

## 2 - RINGER SETTINGS

A switch located on the upper side allows the ringer to be switched HI,LOW,OFF:

 : Off,

 : Low,


 : Hi

(\*) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.

Your phone comes with the ringer switched to «High» and the melody set to «6»:

	Low	Mid	High
Melody 1	1	2	3
Melody 2	4	5	6 (by default)
Melody 3	7	8	9

If you don't like the ringer melody, you can choose a new one by changing the settings as per instructions below:

- Lift the handset.
- Press  button.
- Press # button.
- Press any of the 1 - 9 dial keys.

The new ringer settings will be activated with the next incoming call.

**Note:** The ringer level will be increased up to 10 dB if you insert batteries.

### 3 - TONE/PULSE SWITCH (T/P)

The Tone/Pulse switch is factory pre-set to Tone position (T). In UK, all telephone exchanges now use Tone dialling. If your phone does not dial out, it is probably being used from an older private switch-board (PBX). In this case, the Tone/Pulse switch must be moved to Pulse.

### 4 - TIME BREAK RECALL (TBR) SWITCH

For UK, the TBR switch should be set to 100 mS. It can be switched to 300 mS for other locations or PBX's.

**Note: If you are using your CL1100 with a hearing aid, set your hearing aid to "T" position.**

### 5 - WALL MOUNTING

To wall-mount your telephone, slide out the clip, turn and slide back into the wall mounting position



(located in the base unit, just below the ear piece). This will ensure that the handset stays firmly in position.

Step 1





Step 2



Step 3



Make 2 vertical holes in the wall 80mm apart, insert wall plugs and wall mounting screws. The screws should protrude from the wall by 6-7 mm. Place the phone onto the screw-heads and slide down to secure.

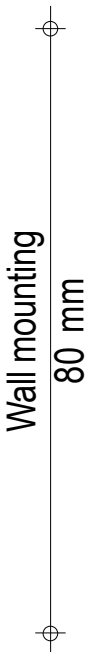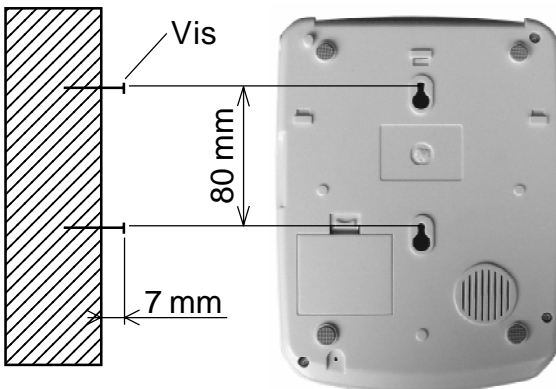


## 6 - DESK SUPPORT

---

The phone can be used on the flat position or raised with the desk support. The desk support will give you the best viewing angle.

To fit the desk support, insert the two upper hooks into the openings provided and push the support firmly home.

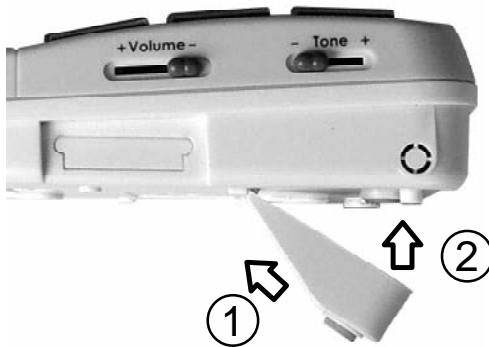



# Tone and volume adjustment


## 1-RECEIVING VOLUME AND TONE ADJUSTMENT


---

You can adjust the receiving volume and tone according to your own hearing requirements.

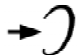The button  allows extra volume and tone functions to be activated or deactivated during the conversation.


Tone and volume adjustment (15dB to 30dB) is only activated when the switch  located at the upper side of your phone is set to **ON**. When this button is set to **OFF** only the volume can be adjusted from 0dB to 15dB.

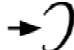When the function is activated, the red light of extra receiving and tone function button  is lit.

**Note:** When the tone (treble), earpiece volume and sending levels are set to the maximum, whistling may occur. If whistling occurs the sending level settings should be decreased with the switch .


## Tone and volume adjustment

Adjust the **TONE** and **VOLUME** buttons to fit the levels to your own hearing requirements.

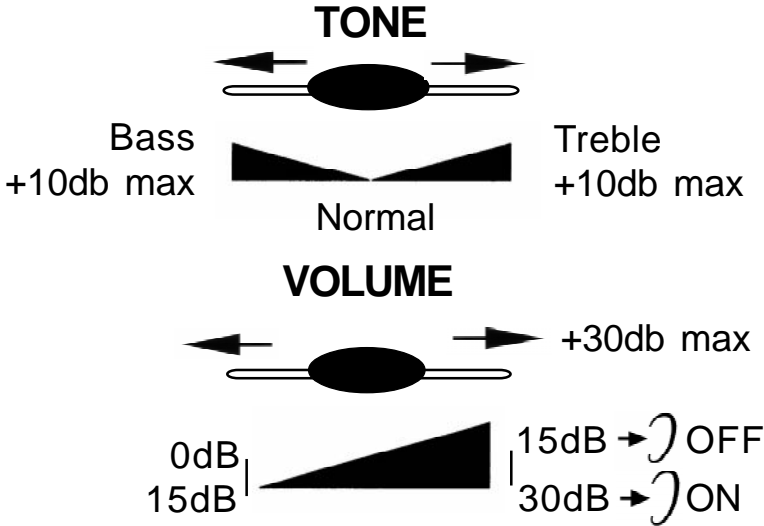

## 2 - SENDING VOLUME LEVEL ADJUSTMENT

If your voice is quiet or called parties have difficulty hearing you, you can increase the sending level volume with the switch located on the upper side. You can also decrease the sending volume if required.

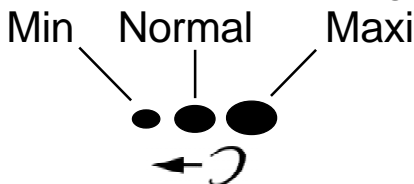

# Using the phone


## 1 - ANSWERING INCOMING CALLS

- When an incoming call is received the phone will ring and the incoming call indicator will flash. To answer the call lift the handset and speak.
- On completion of the call, carefully replace the handset in the cradle to release the line.

## 2 - MAKING A CALL

- Lift the handset.
- Await the dial tone and dial required number.
- On completion of the call, carefully replace the handset in the cradle.



## 3 - LAST NUMBER REDIAL

- Lift the handset.
- Await the dial tone and press  button.
- A previously dialled number will be automatically redialled (not in use for memory numbers).

## **4 - RECALL, \* & # BUTTONS**

These are used with the new services provided on digital exchanges. For details please contact your network operator.



## **5 - MUTE BUTTON**

If you wish to speak privately to someone else in the room without your caller overhearing, press and hold the  button. You will still be able to hear the callers but they cannot hear you during the mute operation. To resume normal conversation, release the  button.

## **6 - STORING TELEPHONE NUMBERS**

Your telephone can store 9 direct memories.

To store a number please follow instructions below:

- Lift the handset.
- Press  button.
- Press **M1**, **M2**, ... **M9** to locate the number.
- Dial the number.
- Press again  button.

Numbers will be lost after few hours if you disconnect your phone. Entering a new number in the same location will automatically erase the previous number.



You can insert your contact's photo here.

## **7 - DIALING STORED NUMBERS**

---

- Lift the handset and await the dial tone
- Press the appropriate location button **M1, M2... M9** and the number stored in this location will be dialed automatically.



For product support and help visit our website  
at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)  
telephone 01707 384438



# General informations

## RECYCLING DIRECTIVES

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products in end of life are recycled in the best way.



When this product is out of order, please do not put it in your domestic waste bin.

Please use one of the following disposal options :

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in a appropriate WEEE skip.
- Or hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.

## GUARANTEE


From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of one year. During this time, all repairs or replacements (at our option) are free of charge. Should you experience a problem then contact our helpline or visit our website at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorised Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

**IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM**

**Please note:** The guarantee applies to the United Kingdom only.


**Declaration :** Hereby Geemarc Telecom SA declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EEC and in particular article 3 section 1a, 1b and section 3.

**Telephone connection :** Voltages present on the telecommunication network are classified TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) according to the EN60950 standard.

The telephone does not operate if the line current is lower than 18 mA. 

# Description



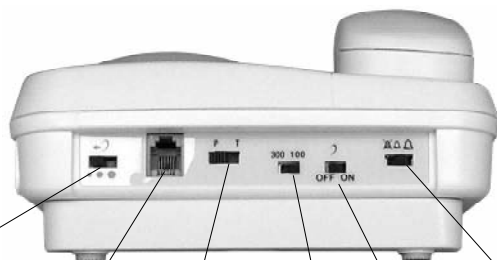

Réglage du volume d'émission

Prise cordon de ligne (\*)

Numérotation Décimale (P) ou

Multifréquences (T)

Réglage du niveau de sonnerie

Activation automatique de la correction d'écoute au décroché

Réglage du temps de coupure pour la fonction R (100, 300mS)



Réglage du volume de réception

Réglage de la tonalité de réception

(\*) Classée TRT-3 selon la norme EN60950

# Installation

## 1 - RACCORDEMENTS

---

- Branchez le cordon du combiné.
- Ouvrez le compartiment à piles situé en dessous de votre téléphone.  
Insérez 4 piles (type AAA 1.5V alcalines), non fournies dans le compartiment (\*). Les piles sont nécessaires si vous désirez augmenter le niveau de sonnerie de 10 dB.  
Remplacez le couvercle du compartiment à piles.
- Branchez le cordon de ligne. (\*)

## 2 - REGLAGE DE LA SONNERIE

---

Un commutateur situé à l'arrière de l'appareil permet de régler la sonnerie:


 : désactivée,  : faible,  : forte

Votre téléphone est positionné sur sonnerie "forte" par défaut.

Si la sonnerie ne vous convient pas, sélectionnez un nouveau réglage parmi les 9 proposés ci-dessous:

	Faible	Moyen	Fort
Melodie 1	1	2	3
Melodie 2	4	5	6 (par défaut)
Melodie 3	7	8	9

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour changer le réglage :

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche  (12).
- Appuyez sur la touche #.
- Appuyez sur un chiffre de 1 à 9.

**Note:** Si vous insérez des piles, le niveau de sonnerie sera augmenté de 10 dB.

### **3 - MULTIFREQUENCES OU DECIMALE? (T/P)**


Au moment de sa livraison, votre téléphone est en mode multifrequences (**T**). Si le central téléphonique dont vous dépendez fonctionne en mode décimale (**P**), vos appels n'aboutiront pas, il vous suffit alors de commuter l'interrupteur **T/P** sur la position **P** pour remédier à ce problème.

### **4 - INTERRUPTEUR 300/100ms**

Cet interrupteur (34) doit être positionné sur 300 pour la France, il peut être positionné sur 100 pour d'autres pays ou utilisation avec un PABX.

### **5 - MONTAGE MURAL**

Pour maintenir votre combiné en position verticale, retirez l'ergot situé sur la base, le tourner et le réinsérer.

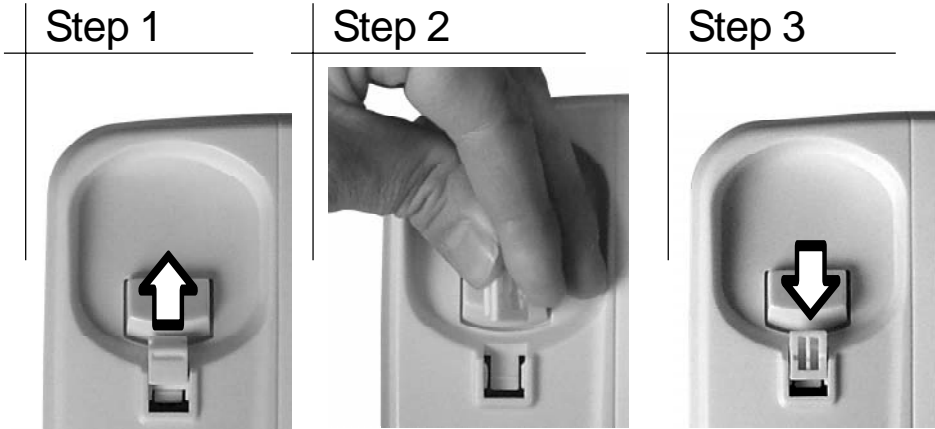

Préparez la fixation murale en plaçant 2 vis au mur d'entraxe vertical 80 mm. Vous pouvez vous aider du gabarit de perçage fourni.

Laissez dépasser les vis de 6-7mm. Faites glisser ensuite votre téléphone dans les têtes de vis.




## 6 - POSITION BUREAU

---

Votre téléphone peut être utilisé à plat sur votre bureau ou avec son socle "bureau" fourni.

Le socle bureau donne un meilleur angle de vu sur le clavier.

Voir la photo ci-dessous pour vous aider à monter le socle.

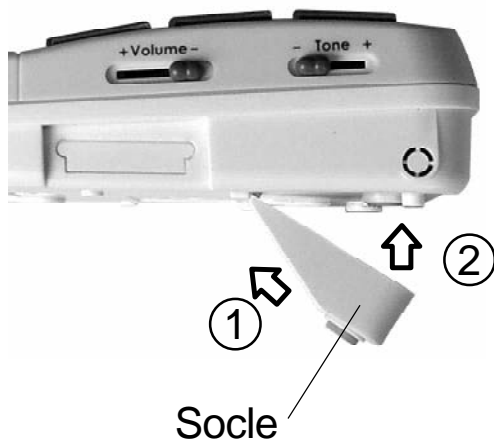




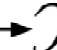
# Réglage du volume et de la tonalité



## 1 - REGLAGE DU VOLUME ET DE LA TONALITE DE RECEPTION

---


Vous pouvez amplifier le volume et régler la tonalité de réception de votre combiné. Appuyez sur la touche  pour activer ou de désactiver le correcteur de réception durant la conversation.

Le réglage de la tonalité et du volume (de 15dB à 30 dB) n'est activé que lorsque la touche est sur **ON**. Lorsque cette touche est sur **OFF** seul le volume peut être réglé de 0dB à 15dB.

Lorsque la fonction est activée, le voyant rouge du correcteur de réception situé en haut de la touche  est allumé.

**Note:** Des sifflements dans l'écouteur peuvent apparaître dans certaines configurations de réglage (tonalité des aigus, volume de réception et volume d'émission au max), dans ce cas diminuez le niveau d'émission avec l'interrupteur . L'interrupteur  sur **ON** situé à l'arrière de l'appareil active automatiquement la correction à chaque décroché de votre combiné.

Les touches **TONE** et **VOLUME**, vous permettent de corriger la tonalité et le volume de réception.

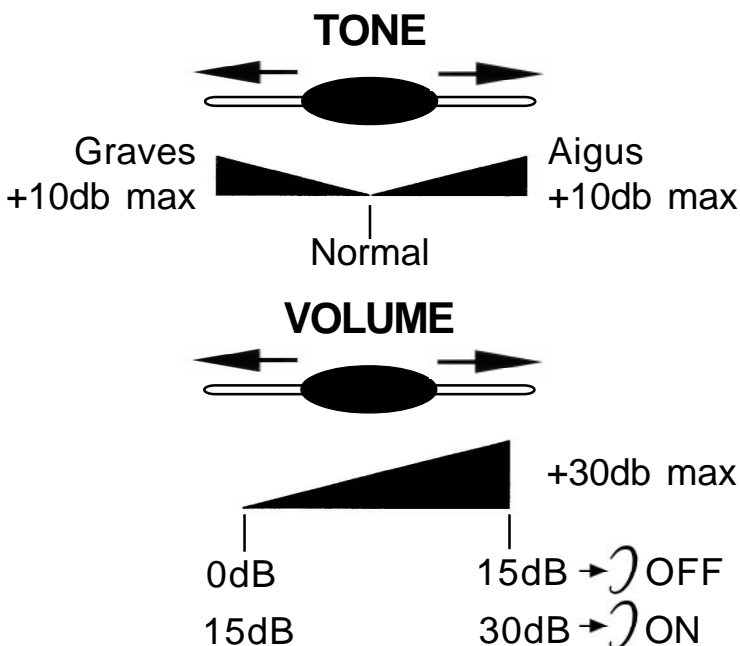

## 2 - REGLAGE DU VOLUME D'EMISSION

Si votre correspondant vous entend faiblement, vous pouvez augmenter le volume d'émission à l'aide du commutateur situé à l'arrière de l'appareil.

Vous pouvez aussi diminuer le volume d'émission avec ce commutateur.



## **1 - RECEVOIR UN APPEL**

---

- Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et le flash lumineux de sonnerie de votre téléphone clignote, décrochez le combiné pour parler à votre correspondant.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.


## **2 - APPELER**

---

- Décrochez le combiné.
- Composez le numéro de votre correspondant.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

## **3 - RAPPEL DU DERNIER NUMERO**

---


- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche  le numéro de votre correspondant se recompose automatiquement (ne fonctionne pas pour les numéros en mémoire).

### **4 - TOUCHES R,\* & #**

Touches d'accès aux Services de France Télécom (Signal d'Appel, Conversation à Trois).

### **5 - FONCTION SECRET**

Cette touche permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication.

- Appuyez et maintenez enfoncé la touche . Votre correspondant ne vous entend plus.

- Relâchez la touche  pour rétablir la conversation.

### **6 - MEMORISER UN NUMERO DE TELEPHONE**

Votre téléphone possède 9 mémoires directes

Suivez la procédure décrite pour mémoriser vos numéros:

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche →◇.
- Appuyez sur une des touches **M1**, **M2**, ... **M9** pour enregistrer votre numéro.
- Composez le numéro.
- Appuyez à nouveau sur la touche →◇.

Les numéros seront perdus après quelques heures si vous déconnectez votre téléphone.

Un nouvel enregistrement dans une mémoire efface le précédent.



Vous pouvez insérer une photo ou toute autre aide mémoire ici.

## **7 - APPEL D'UN NUMERO EN MEMOIRE**

---

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur une des touches **M1, M2, ... M12** et le numéro se recompose automatiquement.



Parc de l'Etoile  
2, rue Galilée  
59760 Grande Synthe  
TEL. SERVICE APRES VENTE :  
03 28 58 75 99  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

# Informations générales

**Recommandations pour le recyclage** : la directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie.



Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jeter pas dans votre poubelle ménagère.

Suivez l'une des procédures décrite ci-dessous:

- Déposez les piles et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Ou rapportez votre ancien appareil chez le distributeur qui vous vendra le nouveau. Il devra l'accepter.

Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

**Garantie** : Cet appareil est garanti 2 ans pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel rapprochez-vous de votre point de vente.

**Raccordement téléphonique** : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38). Le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.



